

erlab

You can breathe.

开普泰 皮尔密得

轻便型气密隔离保护罩

保护操作人员及敏感物品



皮尔密得 2200

轻便型气密隔离保护罩 保护操作人员及敏感物品



皮尔密得 2200是一套多功能气密型隔离保护罩,由高品质透明PVC材质制成,只需数秒安装便可随时随地使用,无论是在室内或户外,符合人体工学设计的倾斜罩体使操作人员舒适操作。轻巧、便携,皮尔密得 2200是一个理想的富有弹性的保护工具,可以适用于实验室的许多特殊实验要求。

手套尺寸	全套装置 (含支撑杆)
XL (超大号)	2200ANM/XL

技术参数

材质

底座:	蓝色 PVC 厚0.4 mm
柜体:	透明 PVC 厚0.3 mm
支撑杆:	白色固体 PVC
手套开口:	固体 PVC 直径:115 mm
手套:	医用 PVC
温度范围:	-25 ° C 至 +45 ° C
净重:	1.55Kg


尺寸

外部尺寸	长	宽	高
	860mm/33,86 inch.	560mm/22,05 inch.	725mm/28,54 inch.
拉链长度:	600 mm		
O型挂环直径:	16 mm		

■ 标准配件




顶部O型挂环
韧度高，易携带

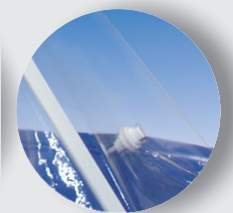

软管接口和阀门
内部样品收集和惰性气体注入



支撑杆
只需5秒，
就可撑起

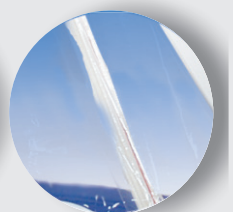

拉链式开口
双排齿链，
密封性强




系列号
便于跟踪服务



PVC 医用手套
高频焊接，
气密性强

出厂测试

每一个皮尔密得 均需做出厂前气密性测试,每一个罩内注2.5 mm Hg气压的压缩气体,如果气密性符合要求,我们会将序列号贴在皮尔密得顶部并且附上测试说明。

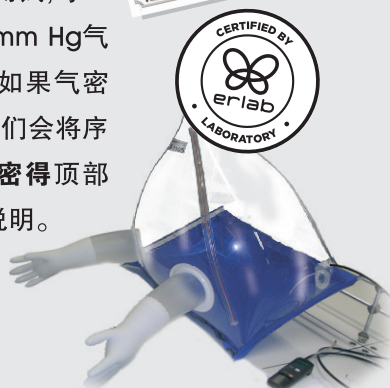

■ 可选配件



工作台面
用于固定罩体,以避免操作过程中产生滑动

■ 应用范围

打开可疑包裹
在惰性气体下进行操作分析
现场采样(材料证据...)
指纹提取
带飞溅危险的操作(如切片等等...)
需防尘防潮的操作
等等...

应用案例

打开可疑包裹



1-打开拉锁，
将包裹放进罩内



2-紧锁拉链



3-戴上皮尔密得
手套后打开包裹

保护易氧化品



1-打开拉锁，
将样品放进罩内



2-紧锁拉链



3-充入中性气体
(如氮气)



4-戴上皮尔密得
手套后操作样品

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案!



GreenFumeHood
可拆卸顶部空气净化系统

绿色实验室整体解决方案



开普泰 Smart
无管路空气净化系统



开普泰 Smart
高性能无管路空气净化系统

确保人员安全、精准精准



开普泰 Smart
高性能空气净化系统



Chemtrap H402 Smart
防大颗粒过滤器

防止吸入有毒化学物质



开普泰 福乐 Smart
洁净工作台

提供无尘、洁净的操作环境



开普泰 贝欧 Smart
PCR 超净工作台

充分保护您的 DNA 和 RNA 样品
免受污染



开普泰 皮尔密得
轻型空气净化系统

保护操作人员及敏感物品



HALO C & HALO P Smart
专业实验室空气净化系统

过滤有害气体、细菌颗粒、病毒、细菌污染物



Halo Sense Smart
高灵敏度空气质量传感器

实时监测您的实验室空气质量

预警您呼吸的空气质量

依拉勃北京联络处

北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2306室
电话: 010-6447 7179 / 6447 7566
传真: 010-6447 6991
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处

广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦
南塔1403单元
电话: 020-3801 7707 / 3801 7709
传真: 020-3801 7703
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处

成都市高新区盛和一路88号
康普雷斯A座1507室
电话: 028-8312 2153
传真: 028-8312 2153
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话: 0532-8093 5939
传真: 0532-8093 5936
邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

电话: 0512-5781 4081 / 5781 4085
传真: 0512-5781 4082
邮箱: sales.china@erlab.com.cn