



Halo Sense Smart

实验室空气质量传感器

实时探测您的实验室空气质量



预警您呼吸的空气质量

保障您的安全

实验室里的空气质量往往受各种有毒气体的影响，Halo Sense为不间断监测实验室的空气质量而设计。

选择最适合的型号


Halo sense有3个型号：分别针对挥发性有机化合物（VOCs），酸和甲醛。

智能技术

当 Halo Sense 监测到有毒气体时，柔和光带会闪烁并伴有报警声来提醒您空气被溶剂或酸或甲醛污染了。Halo Sense 通过eGuard 软件可以实现实时监控并接收信息(例如：调节检测灵敏值、音量高低、开启/关闭灯带闪烁、历史记录等)。它可直接与电脑相连，并通过eGuard 软件开启或关闭；也可通过智能手机下载使用eGuard软件在实验室任意位置获取报警信息。当污染报警出现时，便可确定实验室存在空气污染，由此，实验室应寻找其污染来源，并采用合适的通风设备,如: 通风柜和储药柜，进行污染气体控制和祛除。

Halo Sense 一般固定在墙上，连接电源，并通过当地局域网连接电脑，放置于化学实验室的敏感区域。它将确保实验室工作人员始终处于安全的环境当中。

尺寸 (mm)

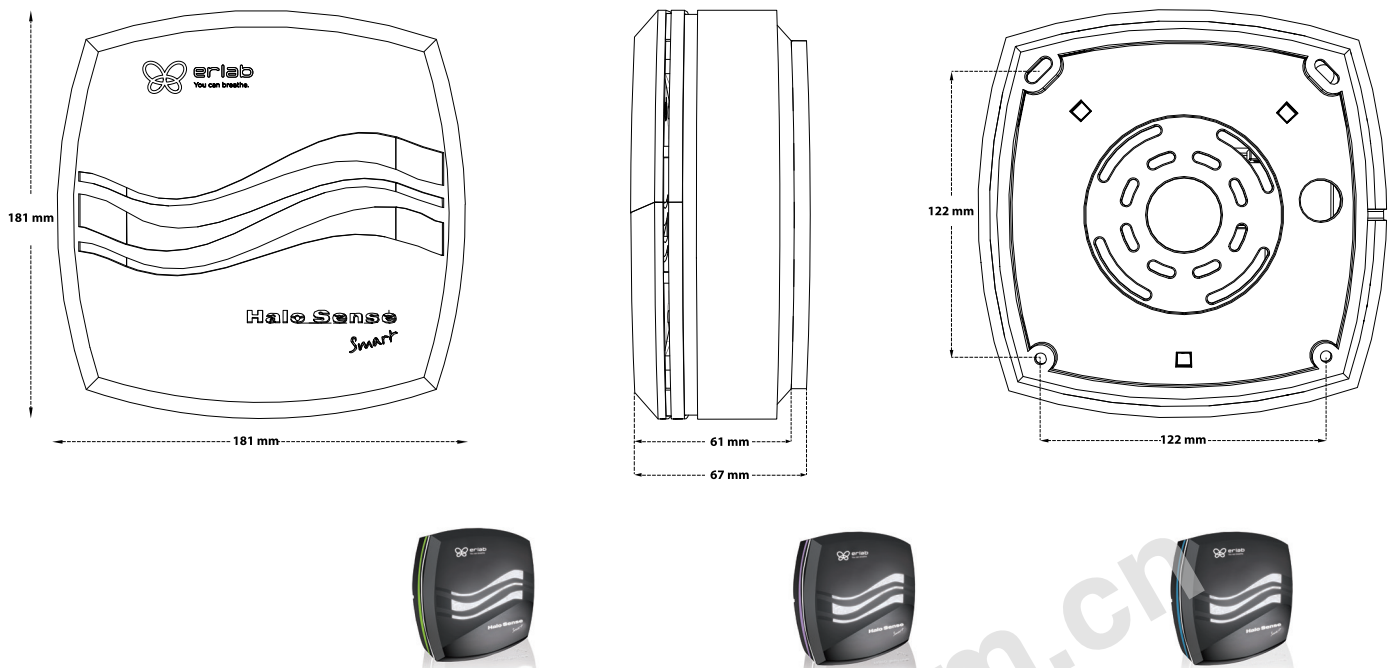

Halo Sense 的三款型号

有机气体
适用于挥发性有机化学实验室

甲醛
适用于甲醛为主的实验室

酸
适用于酸为主的实验室

外壳	轻巧耐用型塑料		
探测器	半导体传感器	电化学传感器	电化学传感器
重量	1kg		
安装方式	桌上型或者壁挂式		
eGuard	监控软件 (可实现远程控制)		
功率	10 W		
用户界面	通过LED脉动系统进行简单的信息沟通		
电压/频率	100-240V; 50-60Hz		



eGuard智能联网, 实时在线监控管理

eGuard会发送警报到您使用的设备上。如果探测到实验室空气被污染, 它将提醒您在空气质量严重污染之前采取行动。



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司
江苏省昆山市张浦德国工业园区
俱进路886号
电话: 0512-5781 4081/5781 4085
传真: 0512-5781 4082
邮箱: sales.china@erlab.com.cn

依拉勃北京联络处
北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2306室
电话: 010-6447 7179/6447 7566
传真: 010-6447 6991
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处
广州市天河区华夏路49号
津滨腾越大厦南塔1403单元
电话: 020-3801 7707/3801 7709
传真: 020-3801 7703
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处
成都市高新区盛和一路88号
康普雷斯A座1507室
电话: 028-8312 2153
传真: 028-8312 2153
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处
青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话: 0532-8093 5939
传真: 0532-8093 5936
邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn