

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案!




昆山依拉勃无管过滤系统有限公司
江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号
0512-5781 4081 / 5781 4085
sales.china@erlab.com.cn
www.erlab.com.cn

免费服务热线
400-666-5781



开普泰
Smart
仪器防护柜

定制化设计, 适用于大型自动化仪器
操作, 为实验人员提供安全防护!

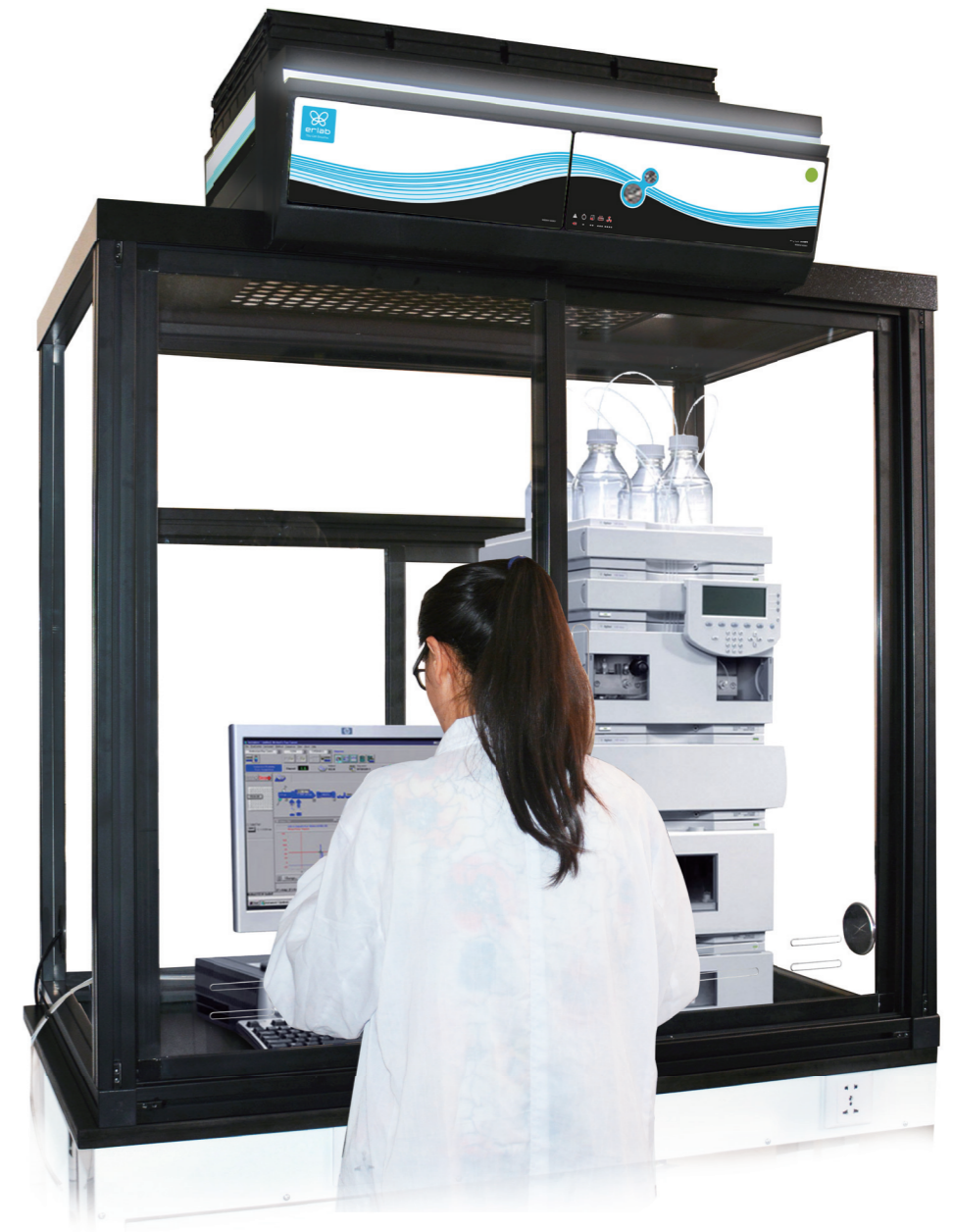

用于放置各类产生




定制化设计， 适用于大型自动化仪器操作， 为实验人员提供安全防护！


- ⊗ 适合放置各种尺寸的仪器设备且无需挪动
- ⊗ 净化有毒气体挥发，避免人员化学吸入风险
- ⊗ 无需外接管道，安装便捷灵活可移动
- ⊗ 灵活的模块化过滤系统适合大多数实验操作




灵活多样的 门板开口

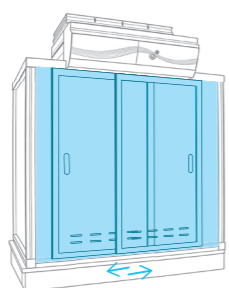

多扇左右推拉式门

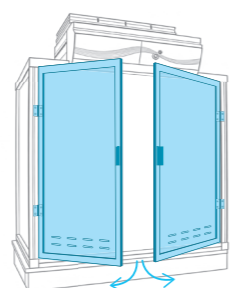


铰链式双开门

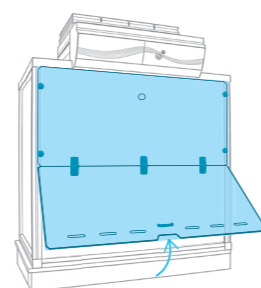

铰链门-顺序开启

安全灵活的依拉勃过滤系统

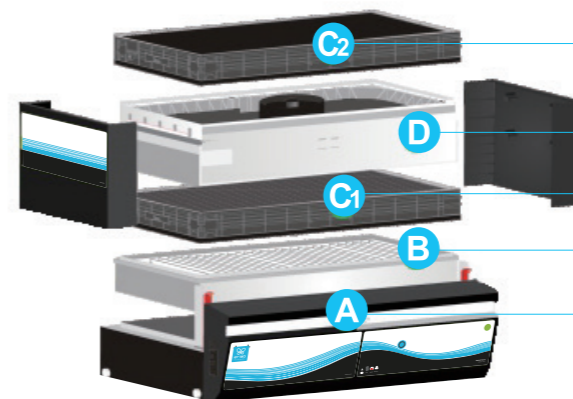

- C2 活性炭过滤器（第二层备用型过滤器）
- D 风机箱
- C1 活性炭过滤器（主过滤器）
- B 选配H14/HEPA过滤器
- A 控制面板

- ☑ 主过滤器和第二层备用型过滤器
- ☑ 用于粉末实验操作的选配HEPA过滤器
- ☑ 选配过滤器监测系统（用于溶剂操作）
- ☑ 过滤效能符合法国NF15-211和中国JG/T385-2021标准