




Chemtrap Smart

防火柜过滤装置

升级您的防火柜和化学品存储柜
防止吸入有毒化学物质



- 防火柜及化学品存储柜升级兼容通风过滤功能
- 过滤防火柜内挥发的有害气体，避免吸入有害化学物质
- 应用Smart智能技术，通过光束、声控系统实现人与设备的沟通
- 安装简单、节能环保、无管道安装
- 持续改善实验室环境

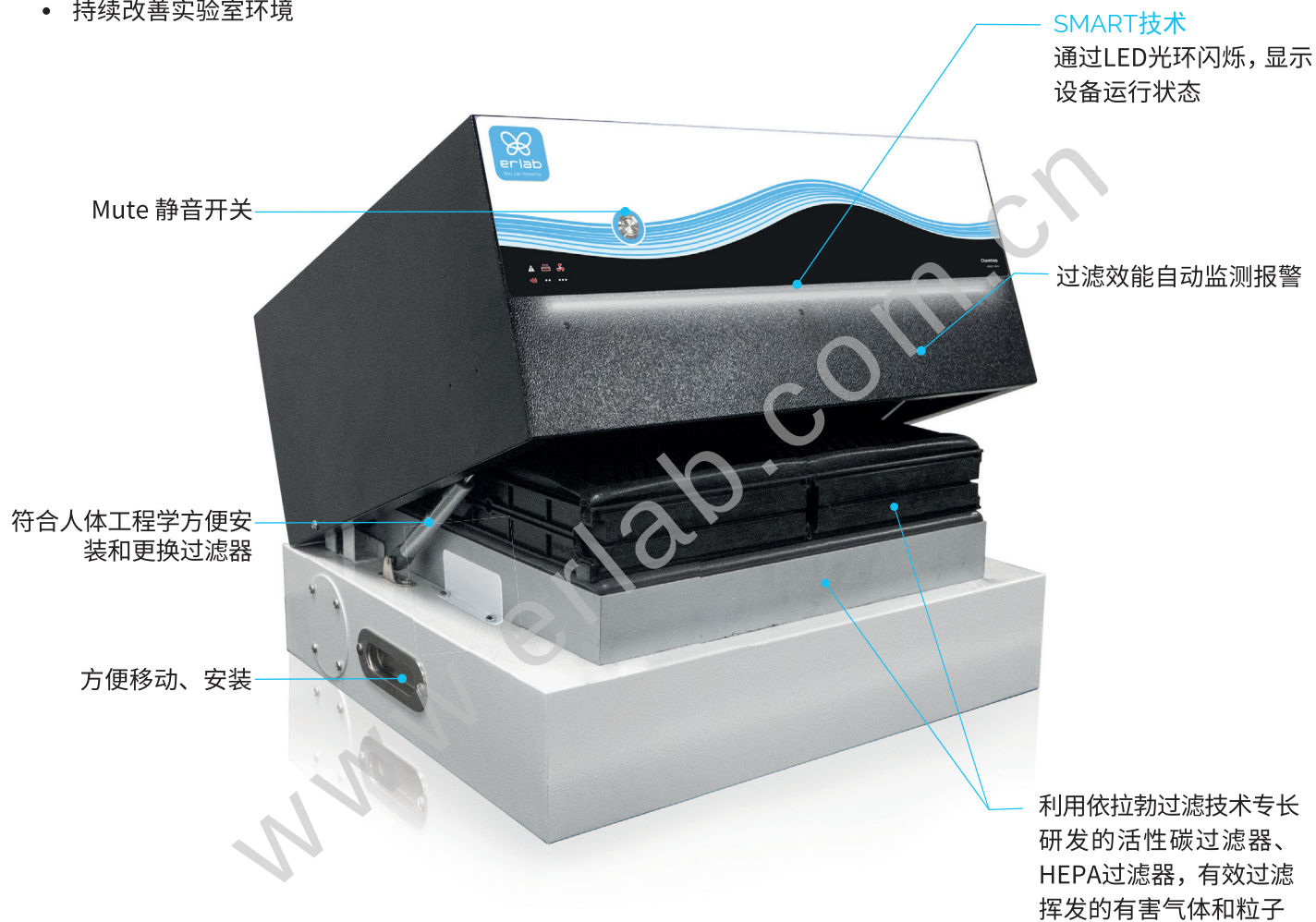

eGuard智能联网，
实时在线监控管理



使您的实验工作变得更简单、更安全！

Chemtrap 防火柜过滤装置

有效祛除防火柜和化学品存储柜内挥发的有害气体

基于依拉勃50多年的净气型防护柜的研发、设计和制造经验，新一代的Chemtrap防火柜过滤装置运用Smart智能化技术，升级过滤系统，让您的防火柜和化学品存储柜更安全、更智能！



依拉勃过滤专长

要求极高的过滤效率



操作更方便

一键启动易安装、易更换过滤器



安全

通过光环闪烁、声音报警传递信息，增强安全性



智能联网

eGuard智能联网，实时在线监控管理



适用范围广

适用于市面上各种防火柜、化学品存储柜

更安全

- 顶部灵活的模块化过滤系统,可实现针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过滤系统过滤后,洁净的空气在室内循环,有效避免了人员的化学品吸入风险,改善实验室环境。


活性炭过滤器选择	
AS	有机气体为主（无机次之）
BE	有机和无机气体
K	氨水
F	甲醛
HEPA过滤器	粉尘颗粒




液体存储



液体与粉尘存储

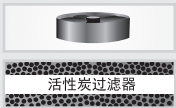

活性炭过滤器

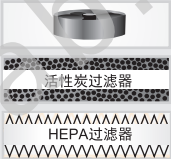

活性炭过滤器
HEPA过滤器

- 新型的用于检测有机溶剂,无机酸及甲醛的过滤器报警器。
- 依拉勃安全流程ESP:通过依拉勃研发和应用实验室的安全评估,对每台产品在使用前进行化学操作适用性及过滤器寿命判定。

更智能

- 智能化技术通过灯光闪烁和声音报警有效提醒用户设备运行状况
- eGuard智能管理系统在线监控您的设备状态,并可以进行程序设置,在不安全状况出现时及时报警提醒。



型号	Chemtrap® H402 Smart	Chemtrap® V201 Smart
外部尺寸(长×宽×高)	482×451×315 mm	245×554×632 mm
空气处理量	60m³/h	35m³/h
电压/频率	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
探测器(选配)	Molecode S (有机类)	Molecode A (酸) Molecode F (甲醛)

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案！



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号

0512-5781 4081 / 5781 4085

sales.china@erlab.com.cn

www.erlab.com.cn

免费服务热线
400-666-5781