



开普泰 贝欧

Smart

PCR 超净工作台

充分保护您的DNA和RNA样品
免受污染






使您的实验工作变得更简单、更安全

保护您的样品免受污染

开普泰Smart贝欧PCR超净工作台专为保护敏感型生物样品免受环境污染和交叉污染而设计，配有高效粒子过滤器，超强紫外线灯净化柜内环境，防止前后两个PCR实验交叉感染，避免损失稀缺的样品，确保样品的成功扩增。

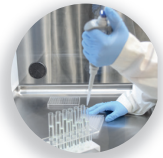

避免环境污染

- 垂直层流避免来自操作人员的污染。
- 配备高效粒子过滤器 (H14 / ULP17) 确保柜体内超洁净空气。



UV 紫外灯杀菌

- 保护样品免交叉污染
- UV紫外灯波长254nm
- UV灯安全开关，前门板打开时UV灯会关闭。



台面易清理

- 工作台面易清理
- 整体式台面，前缘弧形设计（也可选配千思板台面或是304不锈钢台面。




符合人体工学设计

- 倾斜式前门板符合人体工学设计，既舒适又提供工作效率。
- LED照明灯（白天光亮度> 800lux）。

使用更简易

- 智能化技术通过灯光闪烁和声音报警有效提醒用户设备运行状况
- 灯光闪烁及声音报警提供以下实时信息：

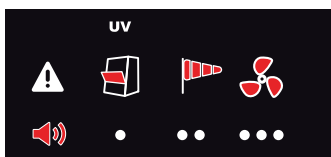

- UV紫外灯杀菌过程中前门板打开
- 面风速故障：检查前门板，前置过滤器或是HEPA/ULPA过滤器是否堵塞
- 风机故障

- eGuard智能管理系统在线监控您的通风柜状态，并可以进行程序设置，在不安全状况出现时及时报警提醒。

操作更安全

- ULPA U17过滤器保证对大于0.1um的粒子过滤率达99.999995%
- HEPA H14过滤器保证对大于0.1um的粒子过滤率达99.995%
- 选配活性炭过滤器保护样品免受实验室空气中有机物污染
- 压差计监测压差变化，提示需更换前置过滤器或风机下方的高效粒子过滤器

PCR超净工作台型号、尺寸


Captair® BIO 320



Captair® BIO 321 Smart



Captair® BIO 391 Smart

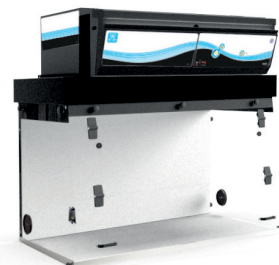

型号	Captair® BIO 320	Captair® BIO 321 Smart	Captair® BIO 391 Smart
外部尺寸 (mm) (长 x 宽 x 高)	809x616x715	809x615x967-1066	1005x615x967-1066
内部尺寸 (mm) (长 x 宽 x 高)	765x497-584x595	765x497-584x595	969x497-585x595

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案！



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号

0512-5781 4081 / 5781 4085

sales.china@erlab.com.cn

www.erlab.com.cn

免费服务热线
400-666-5781