

开普泰 皮尔密得

轻便型气密隔离保护罩

保护操作人员及敏感物品



皮尔密得 2200

轻便型气密隔离保护罩 保护操作人员及敏感物品



皮尔密得 2200是一套多功能气密型隔离保护罩,由高品质透明PVC材质制成,只需数秒安装便可随时随地使用,无论是在室内或户外,符合人体工学设计的倾斜罩体使操作人员舒适操作。轻巧、便携,皮尔密得 2200是一个理想的富有弹性的保护工具,可以适用于实验室的许多特殊实验要求。

手套尺寸	全套装置 (含支撑杆)
XL (超大号)	2200ANM/XL

技术参数

材 质

底座:	蓝色 PVC 厚0.4 mm
柜体:	透明 PVC 厚0.3 mm
支撑杆:	白色固体 PVC
手套开口:	固体 PVC 直径:115 mm
手套:	医用 PVC
温度范围:	-25 ° C 至 +45 ° C
净重:	1.55Kg

尺 寸

外部尺寸	长	宽	高
	860mm/33,86 inch.	560mm/22,05 inch.	725mm/28,54 inch.
拉链长度:	600 mm		
O型挂环直径:	16 mm		

■ 标准配件




顶部O型挂环
韧度高，易携带



软管接口和阀门
内部样品收集和惰性气体注入



支撑杆
只需5秒，
就可撑起

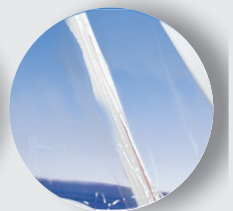

拉链式开口
双排齿链，
密封性强




系列号
便于跟踪服务



PVC 医用手套
高频焊接，
气密性强

出厂测试

每一个皮尔密得 皆需做出厂前气密性测试,每一个罩内注2.5 mm Hg气压的压缩气体,如果气密性符合要求,我们会将序列号贴在 皮尔密得顶部并且附上测试说明。

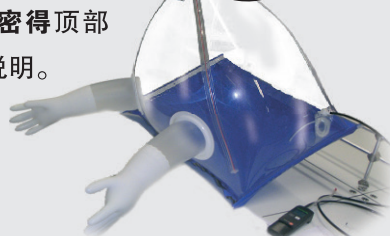

■ 可选配件



工作台面
用于固定罩体,以避免
操作过程中产生滑动

■ 应用范围

打开可疑包裹
在惰性气体下进行操作分析
现场采样 (材料 证据...)
指纹提取
带飞溅危险的操作 (如切片 等等...)
需防尘防潮的操作
等等...

应用案例

打开可疑包裹



1-打开拉锁，
将包裹放进罩内



2-紧锁拉链



3-戴上 皮尔密得
手套后打开包裹

保护易氧化品



1-打开拉锁，
将样品放进罩内



2-紧锁拉链



3-充入中性气体
(如氮气)



4-戴上 皮尔密得
手套后操作样品

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案！



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号

0512-5781 4081 / 5781 4085

sales.china@erlab.com.cn

www.erlab.com.cn

免费服务热线
400-666-5781