



# Halo Sense

实验室空气质量传感器

实时探测您的实验室空气质量



预警您呼吸的空气质量

保障您的安全

实验室里的空气质量往往受各种有毒气体的影响，Halo Sense为不间断监测实验室的空气质量而设计。

选择最适合的型号

Halo sense有3个型号：分别针对挥发性有机化合物（VOCs），酮和甲醛。

智能技术

当Halo Sense 监测到有毒气体时，柔和光带会闪烁并伴有报警声来提醒您空气被溶剂或酸或碱污染了。Halo Sense 通过注册专利的eGuard 软件可以实现实时监控并接收信息(例如：调节检测灵敏度、音量高低、开启/关闭灯带闪烁、历史记录等)。它可直接与电脑相连，并通过eGuard软件开启或关闭；也可通过智能手机下载使用eGuard软件在实验室任意位置获取报警信息。当污染报警出现时，便可确定实验室存在空气污染，由此，实验室可寻找其污染源，并采取合适的通风设备，如：通风柜和储药柜，进行污染气体控制和排除。

Halo Sense 一般固定在地上，连接电源，并通过当地局域网连接电脑，放置于化学实验室的敏感区域。它将确保实验室工作人员始终处于安全的环境当中。




Simpler  
Safer

更安全 更智能



# 技术参数

尺寸 (mm)

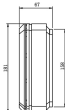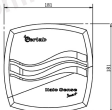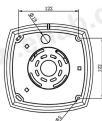

## Halo Sense 的三款型号

**有机气体**  
适用于挥发性有机化学实验室

**甲醛**  
适用于甲醛为主的实验室

**酸**  
适用于酸为主的实验室

外壳	轻巧耐用型塑料		
探测器	半导体传感器	电化学传感器	电化学传感器
重量	1kg		
安装方式	桌面型或者壁挂式		
eGuard	监控软件 (可实现远程控制)		
功率	10 W		
用户界面	通过LED移动系统进行简单的信息传递		
电压/频率	100-240V; 50-60Hz		



请到App应用商城下载我们的eGuard软件  
去发现Halo Sense能探测到什么

eGuard会发送警报到您使用的设备上。如果探测到实验室空气被污染，  
它将提醒您空气质量严重污染之前采取行动。

可用于智能手机、平板及电脑



昆山欧拉德美检测仪器有限公司  
江苏省昆山市周市镇周市路118号

电话: 0512-5781 4381/5781 4885  
传真: 0512-5781 4082  
邮箱: sales.china@erlab.com.cn

北京欧拉德美检测仪器有限公司  
北京市朝阳区东三环南路2号  
金源大厦2199室

电话: 010-6447 7129/6447 7508  
传真: 010-6447 6991  
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

欧拉德美广州联络处  
广州市天河区珠江新城华林路221号  
中海城海逸85-1404

电话: 020-3801 7707/3801 7709  
传真: 020-3805 7703  
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

欧拉德美成都联络处  
成都市锦江区滨江路154号  
联合广场一单元1803室

电话: 028-8512 2153  
传真: 028-8512 2153  
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

欧拉德美南京联络处  
南京市江北新区江浦街道2号  
乙卯与科中路的1103室

电话: 0512-8095 5919  
传真: 0512-8095 5916  
邮箱: erlab-nanjing@erlab.com.cn



免费服务热线: 400-666-5781  
www.erlab.com.cn

Copyright © 2013-2015 erlab